

HISO CrossSeat SET

DE Gebrauchsanweisung

EN Instructions for use

IT Istruzioni per l'uso

FR Mode d'emploi

CS Návod k použití

DA Brugsanvisning

NL Gebruiksaanwijzing

SV Bruksanvisning

FI Käyttöohjeet

SK Návod na použitie

NO Bruksanvisning



Gebruiksaanwijzing: **HSO CrossSeat Set****BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT**

De HSO CrossSeat-set bestaat uit drie onderdelen.

- **HSOCS02** – CrossSeat (PVC)
- **HSOCSFIX02** – CrossSeat-bevestigingsriemen
- **HSOCSREP** – CrossSeat-reparatieset (pvc-strips; hechtmiddel [ingrediënten vermeld op de verpakking], 2 reinigingsdoekjes)

De CrossSeat wordt gebruikt om het bovenlichaam van personen met beperkte mobiliteit stevig te ondersteunen, zodat ze rechtop kunnen zitten in een verpleeg- of ziekenhuisbed.

Beeoogde gebruikers en gebruikersgroepen

Het product is bedoeld voor gebruik door volwassenen. De CrossSeat mag alleen door volwassenen worden bediend.

Gebruiksomgeving en compatibiliteit

Het product is bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen, op verpleegafdelingen of in een thuiszorgsituatie.

Het product kan worden gecombineerd met de volgende extra accessoires:

- **HSOHS-318** – CrossSeat-pomp, met opblaas- en leegloofunctie
- **HSOTF01** – ThoraxSafe-set, voor extra beveiliging en stabilisatie van het romp- en bekkengebied tijdens gebruik van de CrossSeat
- **HSOCSST01SET** – CrossSeat-tafel, kan als dienblad worden gebruikt om bijvoorbeeld zelfstandig te kunnen eten en drinken

**VEILIGHEIDSGEINFORMATIE****Waarschuwingen en veiligheidsinstructies**


- Controleer de CrossSeat en de bevestigingsriemen vóór elk gebruik op zichtbare beschadigingen om een goede werking te waarborgen.
- Schade aan de CrossSeat kan resulteren in luchtlekage en daarmee in een verlies van stabiliteit van het product.
- Volg de instructies van de fabrikant voor het bedienen van de geselecteerde luchtpomp.
- Reinigingsmiddelen die aceton, bleekmiddel of zuren bevatten, zullen het materiaal van de CrossSeat beschadigen. Het gebruik ervan is niet toegestaan.
- Volg de waarschuwingen en veiligheidsinstructies op de verpakking van het hechtmiddel; als u dit niet doet, kan dit letsel tot gevolg hebben.
- Om letsel te voorkomen, moet het gereedmaken van de CrossSeat altijd door twee personen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de gebruiker tijdens de gereedmaken voldoende kan worden ondersteund.
- Voorkom dat de armleuningen te veel naar buiten worden uitgerekt, omdat hierdoor de naden tussen de armleuning en de rugleuning kunnen beschadigen.

Procedure voor productdefecten

Als u een klacht hebt of een probleem opmerkt tijdens het gebruik van dit product, neem dan contact op met de fabrikant die op het product staat vermeld.

GEBRUIK**Vorbereiding**

De volgende poorten bevinden zich aan de achterkant van de CrossSeat (**AFB. 1**)

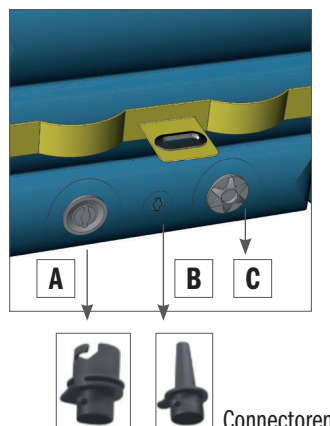AFB. 1

Connectoren

A – Inlaat- en uitlaatventiel, variant A B – Inlaatventiel, variant B
C – Overdrukventiel

De CrossSeat kan worden opgeblazen via een van de inlaatventielen (**AFB. 1** – A of B). Open het gewenste inlaatventiel, steek de juiste adapter in het ventiel en sluit de door u gekozen luchtpomp aan.

Volg de instructies van de fabrikant voor het bedienen van de door u gekozen luchtpomp. Pomp vervolgens de CrossSeat op tot het overdrukventiel opengaat.

Wacht vervolgens 5 tot 10 seconden om de lucht gelijkmatig over het product te laten verdelen. Voeg zo nodig meer lucht toe totdat het overdrukventiel wordt geactiveerd.

TIP : U kunt de stevigheid van de CrossSeat ook individueel aanpassen door lucht via het uitlaatventiel te laten ontsnappen (**AFB. 1** – A: Druk op de gele plug in het ventiel om met korte stoten lucht uit de CrossSeat te laten ontsnappen. Verwijder de adapter en sluit het ventiel zorgvuldig.


Bediening en gebruik

Om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, moet de CrossSeat altijd door twee personen op ziekenhuis- of verpleegbedden worden gemonteerd. De eerste persoon voert de bevestiging uit, terwijl de tweede persoon verantwoordelijk is voor het monitoren en ondersteunen van de gebruiker om vallen of wegzakken te voorkomen totdat de CrossSeat klaar is voor gebruik.

Plaats de opgeblazen CrossSeat achter de rechtop zittende gebruiker op het ziekenhuis- of verpleegbed. Zolang de CrossSeat niet is gezekeerd, mag de rugleuning niet worden belast.

Gebruik de gele lipjes met metalen oogjes om de CrossSeat vast te zetten. Er zitten twee lipjes aan de voorkant van de armleuningen en één aan de rugleuning van de CrossSeat.

Pak het korte uiteinde van de bevestigingsriem en steek de haak in het metalen oogje. Duw/trek de haak vervolgens naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt.

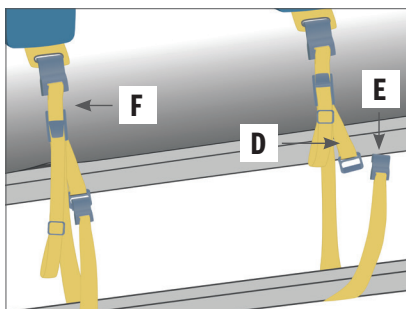

Bevestig de lange zijde van de riem op een geschikt punt op het bed (AFB. 2). Steek de haak (AFB. 2 – E) van de lange zijde in het oogje op de riem (AFB. 2 – D) en duw/trek de haak naar beneden totdat deze in het oogje vastklikt.

De riemplengte kan steeds worden aangepast. Open hiervoor de riemklem. (AFB. 2 – F) en trek aan de riem tot de gewenste lengte. Sluit vervolgens de riemklem weer.

Zodra de CrossSeat goed gezekeerd is, kan de rugleuning belast worden.

Indien gewenst kunt u de CrossSeat nu combineren met aanvullende producten, zoals de ThoraxSafe of CrossSeat-tafel. Raadpleeg de betreffende gebruikershandleidingen voor informatie over het gebruik van deze producten in combinatie met de CrossSeat.

Als u de CrossSeat wilt demonteren, maak dan eerst de riem aan de achterkant van de CrossSeat los, gevolgd door de twee voorste riemen.

Maak de riemen los door de haken omhoog uit de oogjes te duwen.

Onderhoud en verzorging


De CrossSeat opbergen

De CrossSeat moet in de meegeleverde tas worden opgeborgen. Om dit te doen, laat u de CrossSeat leeglopen door de gele plug op het uitlaatventiel (AFB. 1 – A) in te drukken en dit vervolgens te draaien totdat hij ingedrukt blijft.

U kunt de CrossSeat nu handmatig laten leeglopen door de plug ingedrukt te houden of, als de door u gekozen luchtpomp deze functie ondersteunt, de lucht automatisch laten afvoeren.

Zodra alle lucht uit de CrossSeat is verdwenen, draait u het uitlaatventiel opnieuw totdat de gele plug weer omhoog springt. Het ventiel is nu weer goed afgesloten en er kan geen lucht meer ontsnappen.

Om materiële schade te voorkomen, vouwt u de CrossSeat op volgens de instructies in AFB. 4 . Plaats de CrossSeat op het rugleuningelement en vouw de armlenningen naar het midden. Vouw het gedeelte van de rugleuning eenmaal horizontaal en vervolgens verticaal.

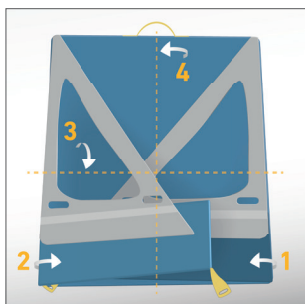

Bewaar de CrossSeat, inclusief de bevestigingsriemen en de reparatieset, in de tas op een droge plaats, beschermd tegen vocht, hitte en direct zonlicht.

De CrossSeat en de bevestigingsriemen schoonmaken

De CrossSeat kan worden gereinigd met warm water en geschikte reinigingsmiddelen. Het gebruik van reinigingsmiddelen die aceton, bleekmiddel of zuren bevatten, is niet toegestaan, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen.

Controleer of alle ventielen gesloten zijn tijdens het reinigen om te voorkomen dat er vloeistof binnendringt.

De bevestigingsriemen kunnen worden gedesinfecteerd met oppervlakteontsmettingsmiddelen op alcoholbasis en in de wasmachine op 60 °C worden gewassen.

De reparatieset gebruiken

De reparatieset bevat reinigingsdoekjes, 3 stuks pvc-patches en een geschikt kleefmiddel, en is bedoeld voor het repareren van kleine scheurtjes in het materiaal van de CrossSeat.

1. Maak het gebied rond de scheur grondig schoon zoals beschreven in het gedeelte 'Onderhoud en verzorging' en maak het gebied vervolgens goed schoon met de meegeleverde reinigingsdoekjes om eventuele resten te verwijderen
2. Knip de PVC-patch op de juiste maat. Zorg ervoor dat de patch groot genoeg is om het gat of de scheur te bedekken en ongeveer 5 cm voorbij de rand van de beschadiging uitsteekt.
3. Breng het kleefmiddel royaal aan op de patch en laat ongeveer 2–4 minuten intrekken.
4. Plaats de patch in het midden over de beschadiging en druk stevig aan. Verwijder luchtballen en oneffenheden door deze naar buiten te drukken.
5. Laat het kleefmiddel minimaal 24 uur drogen. Door een gewicht op de patch te plaatsen kan de hechting verbeteren.

Verwijderen

Gelieve te voldoen aan de lokale wettelijke vereisten voor afvalverwerking. De samenstelling van de producten staat in de productbeschrijving.

Als u ergens over twijfelt of als u vragen hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsautoriteit of de fabrikant van het product.



Gedistribueerd door:

Rudolf Heintel GmbH | Erdbergstraße 166 | 1030 Vienna | www.heintel.at

