

Sie haben die Wahl!

Individuelle Bedürfnisse, Anwendungsgebiete aber auch die menschliche Gewohnheit spielen bei der Auswahl des passenden Skalpell bzw. der richtigen Klinge ebenso zentrale Rollen wie die technische Beschaffenheit der Produkte. Diese zahlreichen Einflussfaktoren bilden die Basis für unser Skalpell- und Klingensortiment.

Einweg-Komplettsysteme

Die Klingen aller HSO-Skalpelle wurden aus **Swedish Stainless Steel** gefertigt. Die Kunststoffgriffe sind **ergonomisch geformt** und verfügen über eine **metrische Skalierung**. Die Einweg-Sicherheits-Skalpelle verfügen zudem noch über eine einziehbare Schutzhülle.

Mehrweg-Skalpellgriffe

Entsprechend der Richtlinie 2010/32/EU „Nadelstichverordnung“ wurde das Sicherheitsskalpell-Sortiment um **ZEUS-Sicherheitsskalpellgriffe N°3 und N°4** erweitert, die **nach der Sterilisation wiederverwendbar** sind. Die Griffe wurden ebenfalls aus Stainless Steel gefertigt, verfügen aber zusätzlich über eine Teflon Beschichtung. Der **unbeschichtete Metallschutzschieber** wird – ähnlich der Stanley-Messer-Mechanik – über die Klinge geschoben, und rastet ein. Die Klinge ist dann vollständig abgedeckt und das Verletzungsrisiko minimiert. Genauso einfach kann die Klinge wieder entsichert werden. Nach dem Gebrauch kann die Klinge – mit Hilfe eines Hebels im Metallschutzschieber – auch kontaktfrei entsorgt werden.

Klingensortiment

Grundsätzlich enthält das HSO-Klingensortiment Produkte für die Griffe N°3 und N°4. Die **Standard-Klingen** für den Skalpellgriff N°3 (Figuren N°10 - N°15SM) sowie den Griff N°4 (Figuren N°18 - N°36) wurden aus Carbon Steel gefertigt und sind für den Einmalgebrauch geeignet.

Herkules-Klingen für den Skalpellgriff N°3 (Figuren 15SM, 15, 11 und 10) bzw. N°4 (Figuren 20, 21) sind zwar ebenfalls aus Carbon Steel gefertigt, sind aber durch einen verstärkten Rücken stabiler und bruchsfester als herkömmliche Klingen.



Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:




**AUF DEN
SCHLIFF
KOMMT
ES AN**

VERTRIEB IN ÖSTERREICH
Rudolf Heintel Gesellschaft m.b.H.
Erdbergstraße 166
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at
www.heintel.at

Foto:
© IStock Photo extravagantni
© IStock Photo -VICTOR-
© IStock Photo Cybernesco

Druck- & Satzfehler vorbehalten
Version 1.1 | Stand: Mai 2021

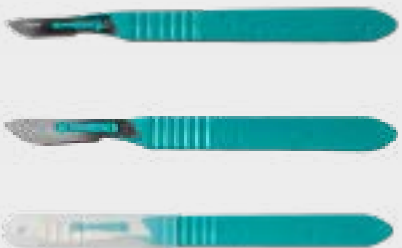

Figuren	Bestell-Nr.
10	HSOSS10
11	HSOSS11
15	HSOSS11P
20	HSOSS20
21	HSOSS21
22	HSOSS22
23	HSOSS23
24	HSOSS24
25	HSOSS25

SAFETY-STITCH CUTTER




Figuren	Bestell-Nr.
Stitch Cutter	HSOSS-STITCH

Wichtig!
Vor der erstmaligen Verwendung von Sicherheitsskalpellen ist eine Schulung nach dem MPG durch einen Produktspezialisten nötig.



Größen	Bestell-Nr.
3	HEISSG3
3L	HEISSG3L
4	HEISSG4
4L	HEISSG4L


N°3

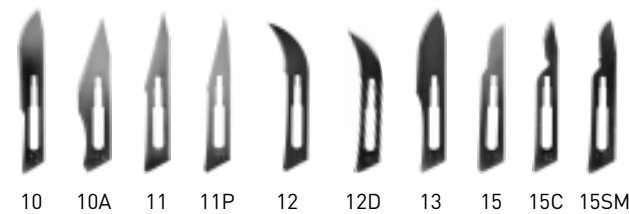

Figuren	Bestell-Nr.
10	HEIK10
10A	HEIK10A
11	HEIK11
11P	HEIK11P
12	HEIK12

Figuren	Bestell-Nr.
12D	HEIK12D
13	HEIK13
15	HEIK15
15C	HEIK15C
15SM	HEIK15SM


N°4

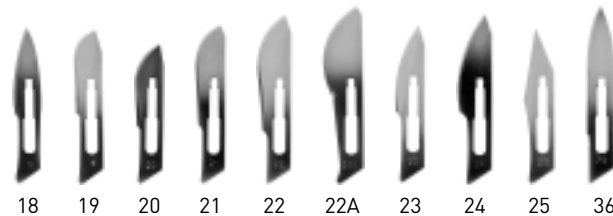

Figuren	Bestell-Nr.
18	HEIK18
19	HEIK19
20	HEIK20
21	HEIK21
22	HEIK22

Figuren	Bestell-Nr.
22A	HEIK22A
23	HEIK23
24	HEIK24
25	HEIK25
36	HEIK36

N°3

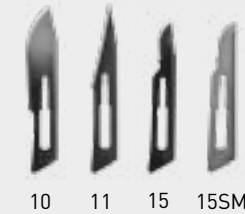

Figuren	Bestell-Nr.
10	HEIKH10
11	HEIKH11
15	HEIKH15
15SM	HEIKH15SM

N°4



Figuren	Bestell-Nr.
20	HEIKH20
21	HEIKH21
22	HEIKH22



standard midi lang

Figuren	Bestell-Nr.
stitch cutter standard	HSOSTCS
stitch cutter midi	HSOSTCM
stitch cutter lang	HSOSTCL